



Biolife

**DIRECTIONS - ISTRUZIONI - PRÉPARATION -
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCCIONES -
INSTRUKTIONER - INSTRUCÕES - ΟΔΗΓΙΕΣ**

RABBIT PLASMA FIBRINOGEN RPF SUPPLEMENT II

REF 423102 4 X 10 mL


Freeze-dried selective supplement for the isolation of *Staphylococcus aureus* / Supplemento selettivo liofilizzato per l'isolamento di *Staphylococcus aureus*/ Supplément sélectif lyophilisé pour l'isolement de *Staphylococcus aureus*/ Gefriergetrocknetes Selektiv-Supplement zur Isolierung von *Staphylococcus aureus*/ Suplemento selectivo liofilizado para aislamiento de *Staphylococcus aureus*/ Lyophiliserat selektivt supplement för isolering av *Staphylococcus aureus*/ Suplemento seletivo liofilizado para o isolamento de *Staphylococcus aureus*/ Λυοφιλοποιημένο εκλεκτικό συμπλήρωμα για τον προσδιορισμό *Staphylococcus aureus*

CONTENTS/CONTENUTO/PRESENTATION/PACKUNGSINHALT/CONTENIDO/ INNEHÅLL /CONTEÚDO/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
4 VIALS FOR 90 ML OF MEDIUM / 4 FLACONI PER 90 ML DI TERRENO / 4 FLACONS POUR 90 ML DE MILIEU / 4 RÖHRCHEN FÜR 90 ML NÄHRBODEN / 4 VIALES PARA 90 ML DE MEDIO/ 4 AMPULLER, VARJE AMPULL ANVÄNDS TILL 90 ML MEDIUM/ 4 FRASCOS PARA CADA 90 ML DE MEIO/4 ΦΙΑΛΙΔΙΑ, ΕΚΑΣΤΟ ΓΙΑ 90 ML ΜΕΣΟΥ.

VIAL CONTENTS / CONTENUTO DEL FLACONE /COMPOSITION PAR FLACON / ZUSAMMENSETZUNG JE RÖHRCHEN / CONTENIDO POR VIAL / AMPULLENS INNEHÅLL / CONTEÚDO DO FRASCO / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ

Fibrinogen 380.0 mg, Trypsin inhibitor 2.5 mg, Rabbit plasma 2.5 mL, Potassium tellurite. 2.5 mg

DIRECTIONS / ISTRUZIONI / PRÉPARATION / ZUBEREITUNG / INSTRUCCIONES /INSTRUKTIONER / INSTRUCÕES / ΟΔΗΓΙΕΣ.

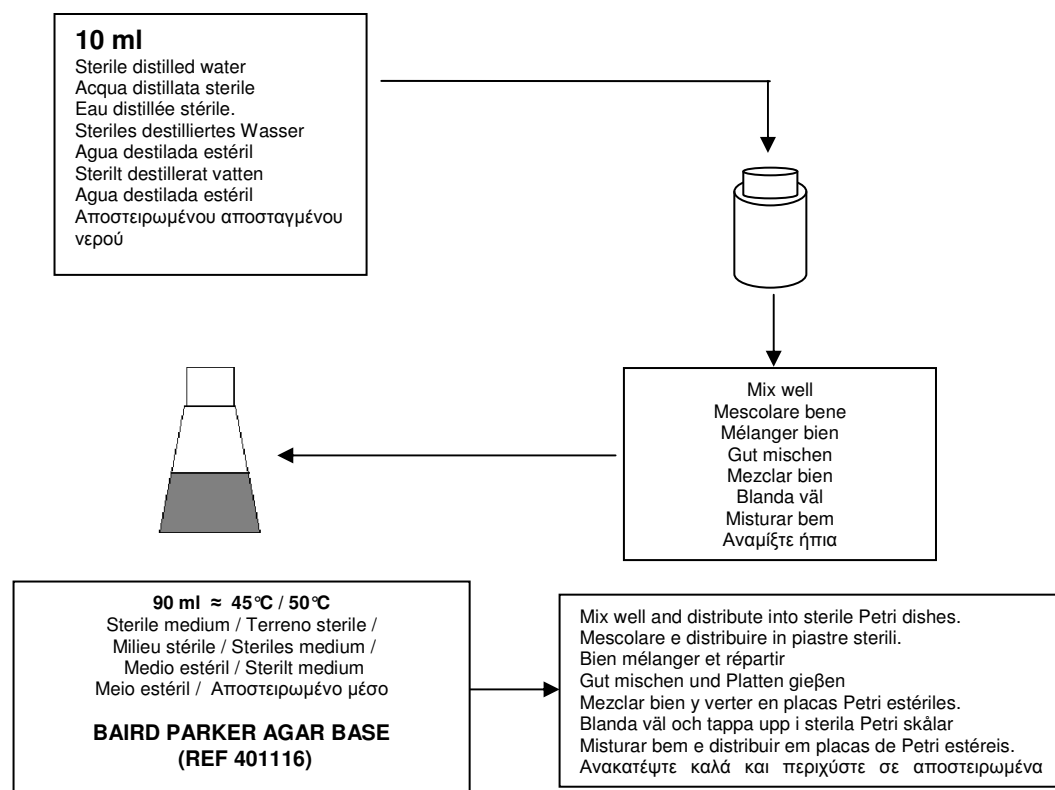



Biolife

**DIRECTIONS - ISTRUZIONI - PRÉPARATION -
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCCIONES -
INSTRUKTIONER - INSTRUCÕES - ΟΔΗΓΙΕΣ**

STORAGE / CONSERVAZIONE / CONSERVATION / LAGERUNG / CONSERVACIÓN / LAGRING / CONSERVAÇÃO / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Store at 2-8° - When stored as directed the supplement remains stable until the expiry date shown on the label. Do not use beyond stated expiry date. / Conservare a 2 - 8°C- In queste condizioni il prodotto rimane valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare dopo la data di scadenza. / Conserver à 2-8°C, selon les conditions de conservation indiquées, le produit est stable jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'étiquette. Ne pas utiliser après la date d'expiration. / Lagerung: 2-8°C. Das Supplement st bei vorschriftsmäßiger Lagerung bis zum aufgedruckten Verfalldatum haltbar. Verfalldatum beachten. / Conservar entre 2-8°C. Estable bajo estas condiciones, hasta la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. No utilizar si ha caducado. / Lagras i 2-8°C. Om lagring sker korrekt håller sig supplement hela tiden fram till utgångs datumet som står antecknat på etiketten. Använd ej produkten efter utgångs datum. / Armazenar a 2-8°C. Quando armazenado nestas condições, o suplemento permanece estável até a data de expiração indicada no rótulo. Não utilizar após a data do vencimento. / Φυλάξτε στους 2-8°C. Όταν φυλάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες, το συμπλήρωμα παραμένει σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που φαίνεται στην ετικέτα. Μην χρησιμοποιείτε πέραν της αναφερομένης ημερομηνίας λήξεως.

**PRECAUTIONS / PRECAUZIONI / PRÉCAUTIONS / VORSICHTSMABNAHMEN / PRECAUCIONES / SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
PRECAUÇÕES / ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

For *in vitro* diagnostic use only. The supplement should be used only by adequately trained personnel with knowledge of microbiological techniques in the laboratory. / Solo per uso diagnostico *in vitro*. Il prodotto deve essere usato solo in laboratorio, da operatori addestrati e con conoscenze delle tecniche microbiologiche di base. / Pour usage *in vitro* exclusif. Ce produit ne doit être utilisé qu'en laboratoire par des personnels formés aux techniques de microbiologie. / Zum Gebrauch für *in vitro* Diagnostik. Nur entsprechend ausgebildete Personen mit Kenntnissen in mikrobiologischen Methoden dürfen dieses Produkt nutzen. / Uso sólo para diagnóstico *in vitro*. El suplemento debería ser sólo usado por personal adecuadamente cualificado con conocimientos de las técnicas microbiológicas en laboratorios. / Endast för *in vitro* diagnostik. Supplementet skall endast hanteras av behörig personal med kunskap om mikrobiologiska laboratorietekniker. / Somente para uso diagnostico *in vitro*. O suplemento deve ser utilizado somente no laboratório por pessoas adequadamente treinadas e com conhecimento em técnicas microbiológicas. / Το συμπλήρωμα πρέπει να χρησιμοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με γνώση των μικροβιολογικών τεχνικών στο εργαστήριο.



Biolife Italiana S.r.l. Viale Monza 272, 20128 Milano. Tel. n° 02-25209.1, Fax n° 02-2576428,
E-mail: mktg@biolifeitaliana.it ; Web: www.biolifeitaliana.it